



CHEMGENE HLD₄H

Detergent Dezinfectant de Nivel Înalt
pentru suprafețe și echipamente medicale,
inclusiv echipamente din laboratoare medicale



Apariția CHEMGENE HLD₄H continuă tendința tehnologiei de vârf în biosecuritate stabilită de Medichem International Ltd. și prezintă realizări semnificative în tehnologia dezinfectanților.

CHEMGENE HLD₄H beneficiază de o gamă formidabilă de acreditări microbiologice privind facilitățile îmbunătățite, rapidității și eficienței mai mari a activității anti-patogene.

Siguranța, Securitatea și Simplitatea au fost și ele îmbunătățite, permițând CHEMGENE HLD₄H să ofere diluții economice pentru toate exigențele în biosecuritate.

CHEMGENE HLD₄H este fabricat în conformitate cu Sistemul de Management al Calității ISO 9001 și este biodegradabil conform condițiilor OECD.

THE SCIENCE OF INFECTION CONTROL

CHEMGENE HLD₄H Concentrat (1L și 5L)
Dezinfectant de nivel înalt pentru suprafețe și echipamente medicale, inclusiv echipamente din laboratoare medicale.

CHEMGENE HLD₄H este destinat pentru curățarea și dezinfecția suprafețelor dure din toate zonele medicale. A nu se folosi pentru dezinfecția dispozitivelor medicale invazive.

Aplicații:

La o concentrație de 1% (10 ml concentrat în 1L apă), se obțin efect bactericid și fungicid, după un timp de 5 minute. La o concentrație de 2% (20 ml concentrat în 1L apă), se obțin efectele bactericid, fungicid, virucid și sporicid, după un timp de 5 minute. Nu necesită clătire.

Conține:

Digluconat de clorhexedrină,
Clorură de didecil dimetil amoniu < 10%

CHEMGENE HLD₄H Spray (750ml)

Este o soluție gata de utilizare CHEMGENE HLD₄H Concentrat diluată la 1:20 (5%) care se aplică prin pulverizare.

Acoperă tot spectrul CHEMGENE HLD₄H Concentrat

Nu conține alcool.

Se aplică de suprafețe mici din zona medicală.

Prevăzut cu pulverizator.

Precauții:

Citiți cu atenție fișa tehnică de securitate a produsului înaintea oricărui tip de preparare chimică.

Evitați inhalarea vaporilor ce rezultă în urma diluării produsului.

A se păstra într-un loc răcoros cu temperatura mai mare de 0°C și mai mică de 30°C.

A se păstra departe de copii și animale.

Nu amestecați cu alte produse chimice.

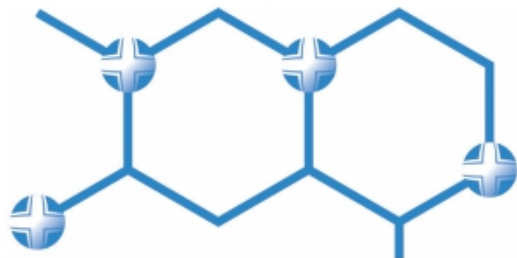
Numai pentru uz extern.

În cazul în care înghițiți produsul beți apă și consultați medicul.




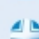
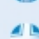
Îndepărtați hainele îmbibate cu substanțe chimice imediat și clătiți cu apă curată din abundență.

Evitați contactul cu ochii. Spălați din abundență cu apă în cazul contactului cu ochii.

Consultați întotdeauna medicul în cazul reacțiilor adverse cauzate de orice tip de produs chimic.



CHEMGENE HLD₄H a fost testat eficient împotriva:

-  **BACTERIILOR**
-  **FUNGILOR**
-  **MYCOBACTERIILOR**
-  **VIRUSURILOR**
-  **SPORILOR**

Compatibilitatea materialelor

Testele de laborator independente demonstrează că produsul nu este coroziv și nu deteriorează următoarele materiale:

Compuși de cauciuc, material plastic, fibră de sticlă, oțel inoxidabil, aluminiu, cupru, alamă și alte materiale găsite în practica clinicilor, în special la podele sintetice, instrumente și dispozitive.

Producător: Medichem International (Marketing) Ltd.,
PO Box 237, Sevenoaks, TN15 0ZJ, UK.
Tel: +44(0)8452223344. E-mail: info@medichem.co.uk

Distribuitor: SC Remix Com SRL,
Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, camera 512B, sector 4, București.
Tel/fax: 021 313 77 88
E-mail: office@remixcom.ro

Produs în Marea Britanie.
Biodegradabil potrivit standardelor OECD.

Miros de eucalipt.

Termen garanție: 2 ani

Xi: Iritant



R36/38 – Iritant pentru piele și pentru ochi
R41 – Risc de afecțiune gravă a ochilor
R50 – Foarte toxic pentru organisme acvatice